PRACTICAL JET





Jato de Bicarbonato

Praticidade, design e ergonomia formam este aparelho para profilaxia dentária.

Jateamento de superfícies através de um sistema de geração de partículas de bicarbonato de sódio em suspensão, inseridas em um jato de ar comprimido.

Conjunto mecânico, alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido, juntamente a um reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio.

Fácil instalação, pois é conectado diretamente no equipo, em substituição à uma peça de mão (ex: alta rotação).


Simplicidade na colocação do pó de bicarbonato através de reservatório localizado na parte superior do equipamento. A tampa transparente auxilia na visualização da quantidade de pó disponível em cada procedimento.

O acionamento do equipamento se dá através do pedal do equipo a que estiver conectado, sem necessidade de alimentação elétrica.

Garantia: 12 meses

Classificação do produto segundo a ANVISA	
Classe de risco ANVISA	2 (médio risco)
Pressão de entrada de água (regulada no equipo)	20 a 40 PSI
Pressão de entrada do ar comprimido (regulada no equipo)	30 PSI - 40 PSI
Máxima vazão de água do spray	0,2mL/segundo
Máxima vazão de pó do spray	0,03 g/segundo
Acionamento	Pedal do equipo

MODERNO SISTEMA PARA PROFILAXIA DENTÁRIA DE FÁGIL MANUSEIO E INSTALAÇÃO

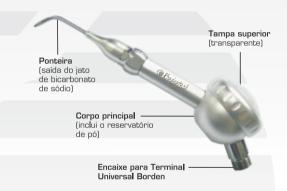

 Ponteira giratória 360°, removível e autoclavável 121°C.



Jato uniforme



Rua Gastão Vieira, 471 São Carlos SP SAK 16 3373-7790 www.kondentech.com.br